

N o e m a
P R O
Body Esthe X

ノエマ プロ ボディエステ X

取扱説明書

保証書付き



このたびはノエマ プロ ボディエステ Xをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになったあとも大切に保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡する時は、この取扱説明書を添付してください。

目次

●安全上のご注意	2～7
●海外での使用について	7
●各部名称・セット内容	8
●充電について	9
●ご使用の前に	10
●レベルについて	11
●機能について	11～12
●各モードについて	13
●使いかた	14～19
●ボディ各部位のおすすめの使いかた	20～21
●本体のお手入れ方法と保管について	22
●よくある質問	23
●故障かなと思ったら	24
●アフターサービス	25
●保証について	25
●無償修理規定	25
●保証書	26
●製品仕様	26

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品はボディケア製品です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用中に痛みや体調不良を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 発疹、発赤、かゆみなどの異常があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- 定められた手順に従って、正しくご使用ください。また、長時間のご使用はおやめください。
- 本体に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理、点検をご依頼ください。
- 故障した状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす可能性がありますので、絶対におやめください。

◆注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

 危険	死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です。
 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

◆お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。(禁止)
	実行しなければならない内容です。(必ず守る)

⚠ 危険



禁止

- 次に該当する人は使用しない。
※**医用電子機器の誤作動を招く原因となります。**

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心臓など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告



禁止

- 次に該当する人は使用しない。
※**事故やトラブルの原因になります。**

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患
- ・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・アレルギー体質の人
- ・血液疾患・内臓疾患・皮膚病・アトピー性皮膚炎・敏感肌または肌の弱い人
- ・疲労が激しい人・皮膚トラブルがある人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人
- ・眠気を誘う薬を服用中の人・生理中・授乳中
- ・目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、あった人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・心臓に障害のある人・妊娠初期の不安定期から出産直後までの人
- ・糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人
- ・体温38℃以上（有熱期）の人・安静を要する人・脊椎の骨折・捻挫・肉離れなど、急性疼痛症疾患の人・血圧に異常のある人・医師に運動を禁じられている人

- 皮膚感覚の低下した人には使わせない。**
※**ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。**

⚠ 警告



禁止

- 指定の部位以外や次のような部分には使用しない。**
※**事故やトラブルの原因になります。**
- ・切り傷・整形手術をした部分・口内や陰部・粘膜部分
- ・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部分
- ・化粧品による皮膚炎を起こしている部分・皮膚が化膿し炎症を起こしている部分
- ・ニキビ部分・かゆみや、ほてりのある部分
- ・手や腕、足首などの細い部分（電極部分全体が触れない部分）
- ・心臓の真上（みぞおち周り）・顔（ボディモード使用時）・頭部・のどぼとけ
- ・骨折部位・ひじ、ひざ、鎖骨、額など皮膚の薄い部位（骨のすぐ上）
- ・体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位

警告



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
 - ・けがをしたり、本体が故障する原因となります。
- 自分で意思表示できない人や皮膚感覚の低下した人に使わせない。
また、体の不自由な人だけの使用は避ける。
 - ・事故やけがをする原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせない。
 - ・事故やけがをする原因となります。
- 急速、高速充電ACアダプターは使用しない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- ACアダプターは、必ず壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 充電時ACアダプターのプラグを最後まできちんと差し込むこと。
 - ・無理やり差し込むと故障の原因となります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 充電ケーブルを傷つけない。
破壊、加工、無理に曲げる、強く引っ張る、ねじる、束ねるなどしない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- ACアダプターや充電ケーブルなどに水がかからないようにする。
(水につけたり、洗ったりしない)
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 分解や修理、改造をしない。
 - ・火災、感電、けがの原因となります。
- 異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
 - ・破損、発火の原因となります。
- 万一、異常が発生したら電源をすぐに切る。動作不良、発煙、異音、異臭がするなど、異常状態のまま使用しない。
 - ・事故やけがをする原因となります。
- 使用後は毎回「本体のお手入れ方法と保管方法」(P.22)を参照して、製品に付着した汚れや汗などを取り除く。
 - ・故障、肌のトラブルの原因となります。

警告



禁止

- 火中投下、加熱、高温での充電、使用、放置をしない。
 - ・本製品は充電式電池を内蔵しています。発火、発熱、破裂の原因となります。
- 引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近くで使用しない。
 - ・火災、感電、ケガの原因となります。

警告



必ず守る

- ACアダプタープラグに水が付着していないことを確認してから充電する。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 使用しないとき、お手入れするときは必ず電源をオフにする。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
また、濡れた手で抜き差ししない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 万一、異常が発生したらACアダプターをコンセントからすぐに抜く。
 - ・けむり、異音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。
- 本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。
 - ・感電、ショート、発火の原因となります。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿やほこりの多い場所に放置しない。
また、熱器具に近づかない。
 - ・発火、発熱、破裂の原因となります。
- 使用した後は、乾いた布などで本体に付いた汗を拭く。
 - ・故障の原因となります。
- 初めて使用するときは、必ずレベル1から使用する。（MFIP、RF、EMS）
 - ・ケガ、肌トラブルの原因となります。

注 意



必ず守る

- 電極面を金属、物に当てない。
 - ・発熱、故障、破損の原因となります。
- 本体を落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
 - ・事故やケガ、本体が故障する原因となります。
- 本体を水中に入れない。
 - ・本体が故障する原因となります。
- 温泉や入浴剤入りのお湯で使用しない。
 - ・本体が故障する原因となります。
- 本体を熱湯（約85℃以上）やドライヤーの熱風にさらさない。
 - ・本体が変形したり溶けたりする原因となります。
- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、ネイルリムーバーなどの溶剤で拭かない。
 - ・本体表面に損傷を与える原因となります。
- 電源をオンにした状態で、他の美容機器や電気製品に接触させない。
 - ・ケガや本体が故障する原因となります。
- 業務用として使用するなど、過剰な連続使用はしない。
 - ・ケガや機器の発熱などの原因となります。
- 洋服のボタンやベルトのバックルの上から使用しない。
 - ・本体が故障する原因となります。
- ペットには使用しない。
 - ・ケガをする原因となります。

⚠ 注 意



必ず守る

- 使用中に疲労を感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
 - ・翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 頭部には絶対に使用しない。
 - ・ケガの原因となります。
- 肌の状態に合わせて使用する。
 - ・肌トラブルの原因となります。
- 肌に発疹、炎症、かゆみなどの異常を起こしている場合は使用しない。
 - ・ケガ、肌トラブルの原因となります。
- 日焼け直後、ピーリングやパックのお手入れとの併用は控える。
 - ・ケガ、肌トラブルの原因となります。
- 使用後は必ず電源を切る。
 - ・本体が故障する原因となります。

海外での使用について

⚠ 警 告



必ず守る

- 必ず交流100～240Vで使用する（無償修理は国内のみ）。
 - ・火災、感電、故障の原因となります。



発火注意

- 必ずプラグ形状、電圧を確認のうえ、使用する。
 - ・発火、発熱、故障の原因となります。

- 本製品はAプラグです。それ以外の場合はプラグ変換（付属品ではありません）アダプターをご使用ください。
- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえ、ご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店などにご相談ください。



各部名称・セット内容

・本体×1・置台×1・充電ケーブル×1・隙間用ブラシ×1・水拭きクロス×1・取扱説明書×1

※USB ACアダプターは付属しておりません。別途お買い求めください。
急速、高速充電ACアダプターには対応しておりませんのでご注意ください。

本体：上面

本体：底面


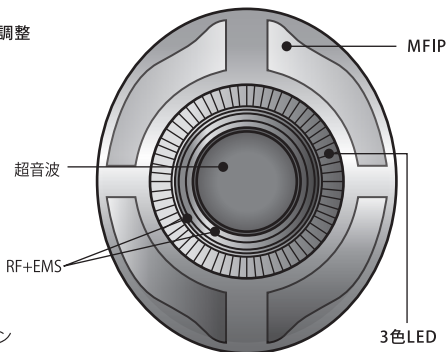
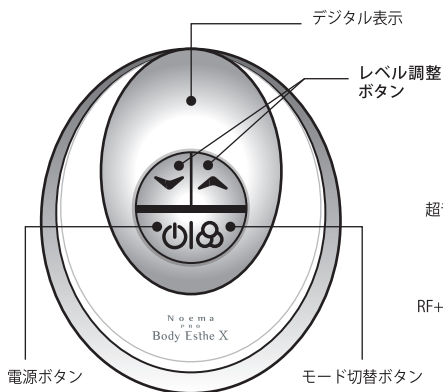


置 台

充電ケーブル

隙間用ブラシ

水拭きクロス

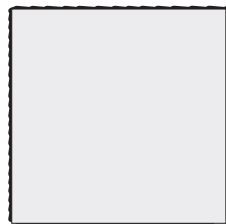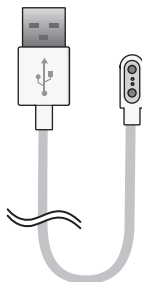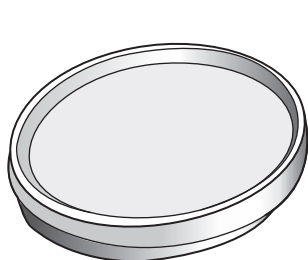

※本体・付属品のデザインや仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

充電について

充電表示について

充電中

デジタル表示は「0」が「点滅」します。



満充電

デジタル表示は「0」が「点灯」します。



充電方法

- ① 操作パネルの裏側にあるマグネット式充電口に充電ケーブルを取り付けます。

※充電ケーブルの向きをご確認ください。
向きが反対だと充電口にくつきません。
右図のように取り付けてください。

- ② パソコンのUSBポートや埋込USBコンセントなどに接続して充電してください。
ACアダプターを使用される場合は、ACアダプターをしっかりとコンセントに差し込んでください。

※急速、高速充電ACアダプターは使用できません。




- ③ 充電完了後、USBポートやコンセントから抜き、充電ケーブルを本体から抜いてください。

※USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V 0.5A以上出力できるACアダプターをご使用ください。

※本体を充電する際には、必ずマグネット式充電口についた水分などを拭き取り、しっかり乾かしてから充電してください。

※使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合)は必ず充電してから使用してください。

※充電しながら使用することはできません。

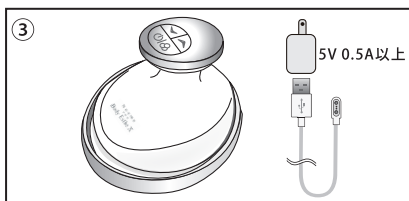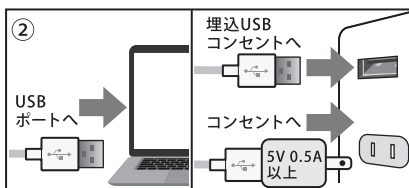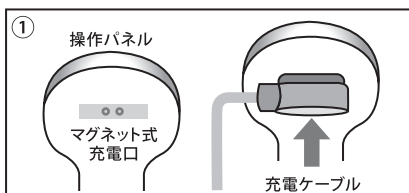


充電時間と動作時間

● 充電時間：約 5 時間(充電環境によって、充電時間は前後します。)

● 動作時間：約 1 時間(使用環境によって、動作時間は前後します。)

ご使用の前に

表示と操作方法について

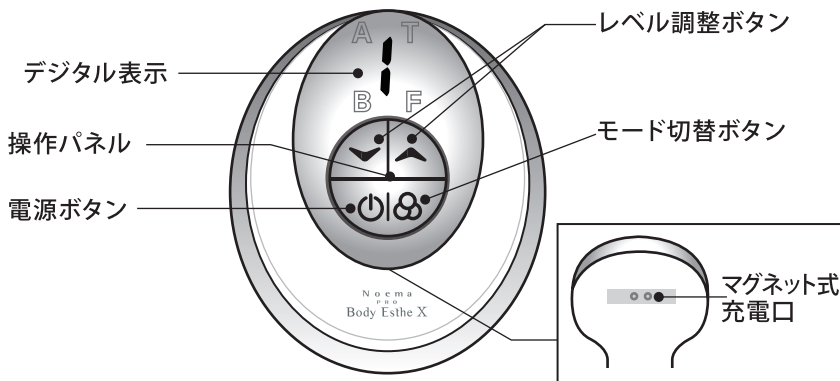


電源の入れかた

電源：オン

電源ボタンを長押しします。(約 1 秒)
ピッという音が鳴り、アームモードのマークが点灯します。


電源：オフ

電源ボタンを長押しします。(約 1 秒)
ピッという音が鳴り、電源が切れます。

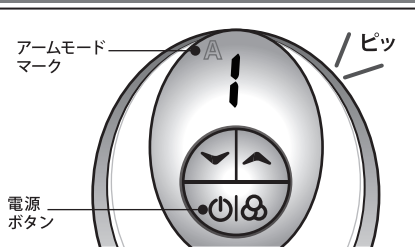

モード切り替え

- モード切替ボタンを押すとモードを変更できます。
- 4つのモードを選択することができます。

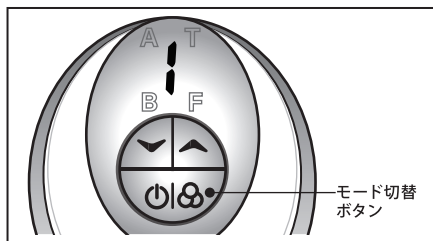

自動電源オフ機能


各モード使用時は10分使用すると自動で電源がオフになります。

レベルについて

- ・レベルは5段階あります。
- ・レベル調整ボタンを押して、レベルを調整できます。
- ・「∧」を押すとレベルが上がり、「∨」を押すとレベルが下がります。
- ・レベルが上がると、温度が高く感じられます。

※使い始めや、慣れるまではレベル1からご使用ください。

※電源をオンにするとレベル1からスタートします。

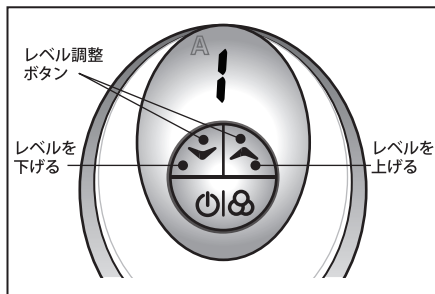

機能について

本製品はMFIP、EMS、超音波（キャビテーション）、RF（ラジオ波）、LED（赤色、青色、紫色）でケアを行う家庭用美容機器です。

ご自身の肌の状況に合わせてレベル調整をし、ケアを行うことができます。

◆MFIP

- ・断続的な電気パルスと言われるエレクトロポレーションイオン導入技術です。90kHz～1000kHz 3種の電流を流すこと。
- ・低、中、高周波の3種類の電流が先端のヘッドから流れます。
- ・肌の深部まで全方面にアタック。肌の環境を整え、ワンランク上のボディケアを目指します。

◆EMS

- ・電気により運動神経に刺激を与え、普段使っていない筋肉を動かすことで肌ケアに役立ちます。

◆超音波（キャビテーション）

- ・最高出力100kHzの音波により、肌に高速振動が伝わり、気になる部位にパワフルにアプローチします。アプローチしづらい部位もケアが可能です。

※モード、環境によって超音波の出力が変わります。

◆RF（ラジオ波）

- ・軽く温めながら肌をマッサージすることで、日常のエイジングケアで角質層までアプローチします。

◆3色LED

- 3色LEDはクリニック光美容にも使われる安全性の高い光です。
- 化粧品を同時に使用して、お肌のお悩みにアプローチします。

◆防水機能

- 本製品は水に対して高い耐水性を備えていますが、完全防水型ではありません。
お風呂での使用は可能ですが、水やお湯の中に本製品を沈めて使用しないでください。
- 使いかたによっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
ご使用になる前に、必ずこの防水性能の内容をご理解のうえ、ご使用ください。

◆自動電源オフ機能

- 全てのモードは5分間経過するとアラームが鳴り、10分間経過すると自動で電源がオフになります。

各モードについて

- 本製品にはフェイスモード、ボディモード、アームモード、太ももモードの4つのモードがあります。

モード	フェイスモード	ボディモード	アームモード	太ももモード
機能	・RF(ラジオ波) ・EMS ・LED(赤色)	・超音波 ・RF(ラジオ波) ・EMS ・MFIP ・LED(紫色)	・超音波 ・RF(ラジオ波) ・EMS ・MFIP ・LED(青色)	・超音波 ・RF(ラジオ波) ・EMS ・MFIP ・LED(赤色)
使用時間 (目安)	10分間	10分間	10分間	10分間
使用頻度 (目安)	週2～3回	週2～3回	週2～3回	週2～3回

※使用禁止部位については (P.3) を参照ください。

※使用時は、一か所に止めず必ずお肌の上を動かしながら使用してください。



※過度な使用は、お肌を傷める原因となります。

※同じ部位に使用する場合は、最低5時間程度あけてください。

●ヘッド部分のあてかた

・使用する体の部位に、ヘッド面全体をあてるようにしてください。

※ヘッド部分が当たっていないと、EMSが通電しないのでご注意ください。

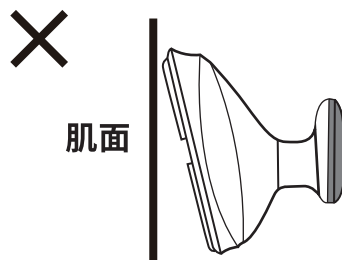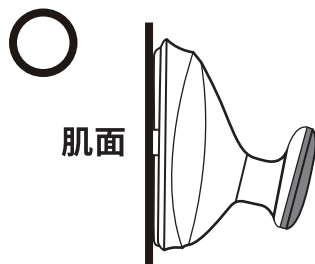


使いかた-フェイスモード

フェイスモードの使用方法（使用時間：10分 使用頻度：週2～3回）

●フェイスモードは「RF（ラジオ波）」「EMS」「LED赤色」が出力されています。

⚠ 使用上のご注意

- ※顔にはボディモードではなく、必ずフェイスモードに設定しご使用ください。
- ※まぶた、額、目のまわり、鼻、唇には使用しないでください。
- ※ヘッド部分がしっかり触れるようにご使用ください。

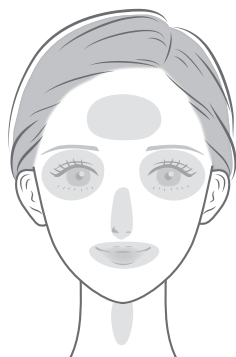


✕ 使用できない部位

- 1 顔の使用する部分に化粧水やジェル（ディアンジェEMS機器用ジェル）を塗布します。




- 2 電源ボタンを長押しします。（約 1 秒）ピッという音が鳴り、アームモードのマークが点灯します。
モード切替ボタンでフェイスモードを選択します。

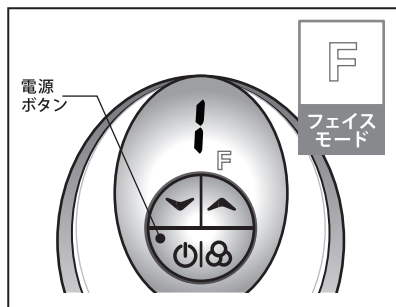

3 お肌のお好みに合わせて、レベルを調整します。

※使い始めは必ずレベル1からご使用ください。

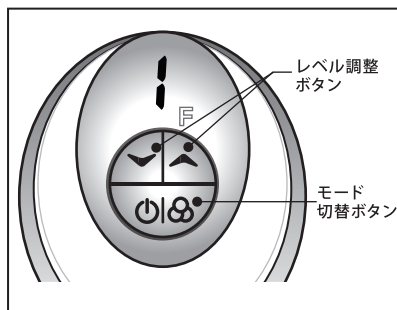


4 右側の使用イメージの矢印のように動かしながら使用します。

※ヘッド部分をしっかり肌にあててください。


※動かしながら使用し、一か所に固定しないでください。

※肌が乾いてきたら、化粧水やジェルを追加して塗ってください。

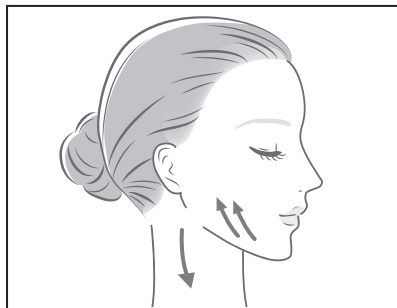

5 使用を終了するときは、電源ボタンを長押しし(約 1 秒)、電源をオフにします。

※フェイスモードは、使用を始めてから10分で電源が自動でオフになります。

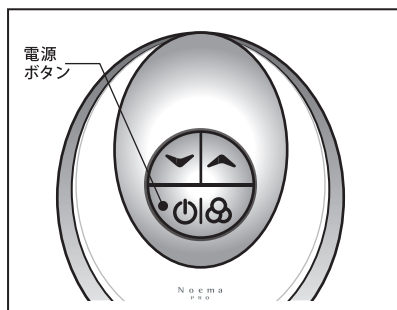


使いかた-ボディモード

ボディモードの使用方法


(使用時間：10分 使用頻度：週2～3回)

- ボディモードは「超音波」「RF(ラジオ波)」「EMS」「MFIP」「LED紫色」が出力されています。

- 1 使用する部位にジェル(ノエマ プロボディマッサージェルまたはファーマングローション)を塗布します。

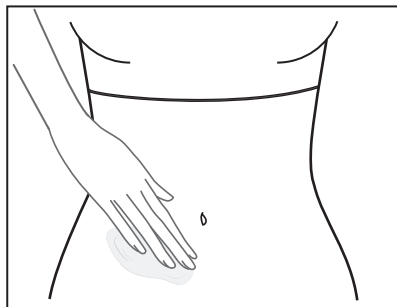


- 2 電源ボタンを長押しします。(約1秒) ピッと音が鳴り、アームモードのマークが点灯します。モード切替ボタンでボディモードを選択します。

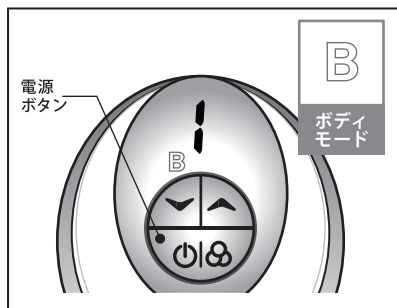

- 3 お肌のお好みに合わせて、レベルを調整します。

※使い始めは必ずレベル1からご使用ください。


※EMS使用時はピリピリとした痛みを感じるほど、レベルを上げないでください。

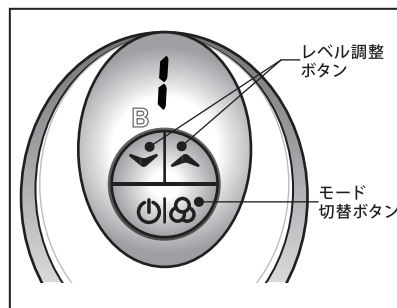

4 肌の上を動かしながら使用します。


- 使い始めはゆっくりと動かします。
(目安：約2cm/1秒)
- 最後に仕上げで素早く流すように動かします。(目安：約5cm/1秒)
- 右の図のようにヘッド面全体がお肌に触れるようにしてください。

※おすすめの使い方は、P.20～21、ヘッド部分の正しいあてかたは、P.13を参照してください。

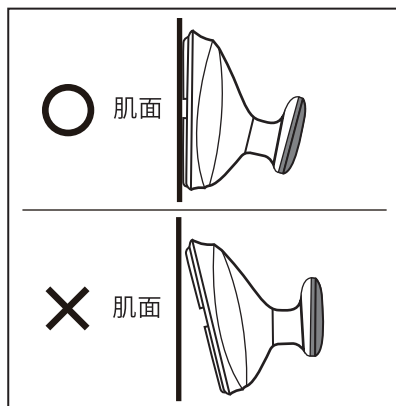

5 使用を終了するときには、電源ボタンを長押しし(約 1 秒)、電源をオフにします。

※ボディモードは、使用を始めてから10分で電源が自動でオフになります。

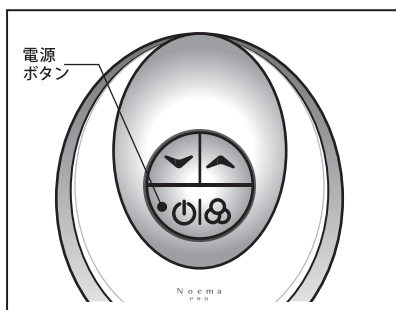

⚠ 注意



必ず守る

- 使用するときには必ずヘッド面全体がお肌にあたるように使用してください。
- 使用禁止部位には絶対に使用しないでください。
 - 口内や陰部、粘膜など、のどぼとけ、整形手術をした部位
 - インプラントの上、切り傷、心臓の真上、顔(ボディモード使用時)
 - 耳、鼻、唇、目のまわり、指や手首、足首などの細い部分
 - ひじ、ひざ、鎖骨、額などの皮膚が薄い部位、頭部
- 使用時は一か所に止めず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。
- 推奨の化粧品、水以外は使用しない。
 - 肌トラブル、故障の原因となります。


使いかた-アームモード

アームモードの使用方法（使用時間：10分 使用頻度：週2～3回）

- アームモードは「超音波」「RF（ラジオ波）」「EMS」「MFIP」「LED青色」が出力されています。

- 1** 使用する部位にジェル(ノエマ プロボディマッサージジェルまたはファーマーミングローション)を塗布します。


電源ボタンを長押しします。(約 1 秒)
ピッという音が鳴り、アームモードの
マークが点灯します。

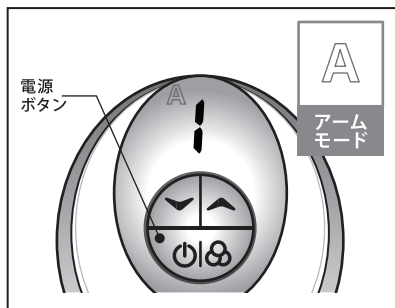

二の腕（各腕：5分）

- ## 2 手順に従ってマッサージを行う。

- ①手の平を上にし、腕をまっすぐ伸ばす。
 - ・二の腕の気になる部分が下になるようにします。
- ②ひじからワキに向かって動かす。
 - ・二の腕の内側、外側両方とも行います。
- ③反対側の腕も行う。

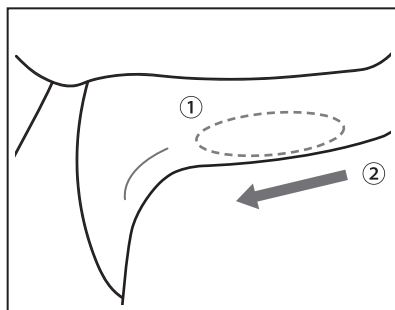

※アームモードは、使用を始めてから
10分で電源が自動でオフになります。

(図の説明)




使いかた-太ももモード

太ももモードの使用方法 (使用時間：10分 使用頻度：週2～3回)

- 太ももモードは「超音波」「RF (ラジオ波)」「EMS」「MFIP」「LED赤色」が出力されています。

- 1** 使用する部位にジェル(ノエマ プロボディマッサージェルまたはファーマングローション)を塗布します。

電源ボタンを長押しします。(約 1 秒) ピッと音が鳴り、アームモードのマークが点灯します。
モード切替ボタンで太ももモードを選択します。

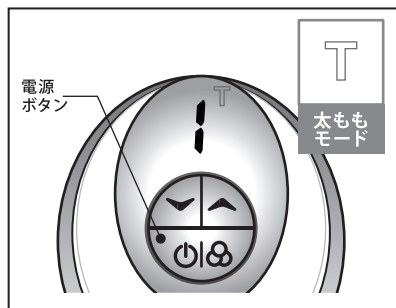

- 2** 手順に従ってマッサージを行う。

- ①太ももの内側部分を、ひざから脚の付け根に向かって動かす。
- ②太ももの裏側を、ひざから脚の付け根に向かって動かす。
- ③反対側の太ももも行う。



※太ももモードは、使用を始めてから10分で電源が自動でオフになります。

(図の説明)

⋯⋯⋯ : EMSの刺激を感じやすい部位

← : 動かす方向



太もも (各脚：5分)

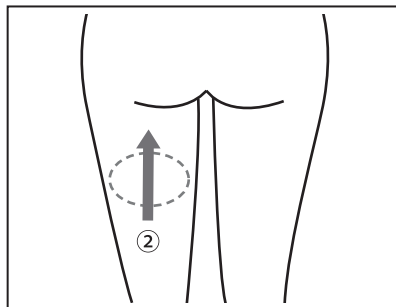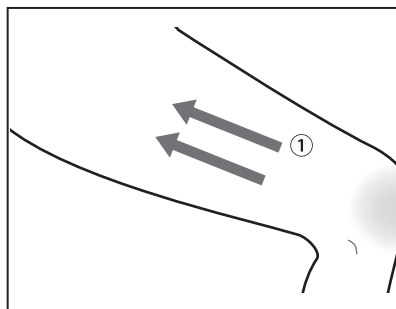

ボディ各部位のおすすめの 使いかた



●お腹（ウエスト）（手順① 5分、手順②+③ 5分）

- ①お腹の外側から内側に向かって、ゆっくりジグザグに動かす。
 - ・ケアする部分を少しずつ脇腹からおへそ寄りに移していきます。
- ②脇腹から脚の付け根に向かって流す様に動かす。
- ③おへその周りを動かす。

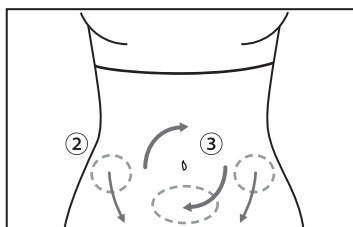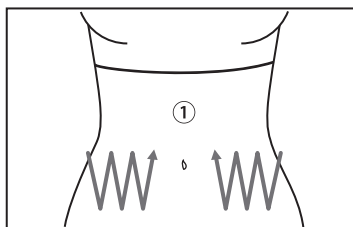


●ヒップ（手順① 5分、手順②+③ 5分）

- ①お尻の内側から外側に向かって、ゆっくりジグザグに動かす。
 - ・ケアする部分を少しずつ外側に移していきます。
- ②内側から外側に向かって動かす。
- ③中心部は、太ももの付け根に向かって上から下に動かす。

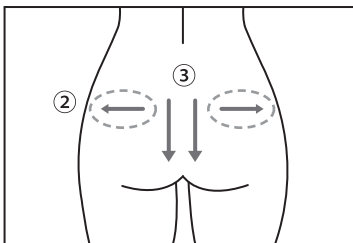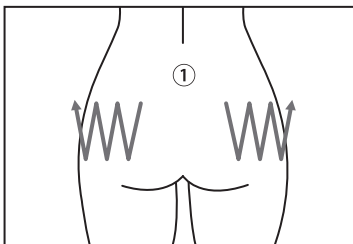


●ひざ周りのケア

- ①ひざ周りのケアがしやすいように
椅子に座ります。

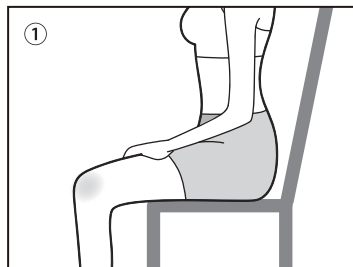

- ②ヘッド部分をひざ頭の上部にあて
て、上方向にゆっくり滑らすように
ケアします。
中心部、側面部もケアします。

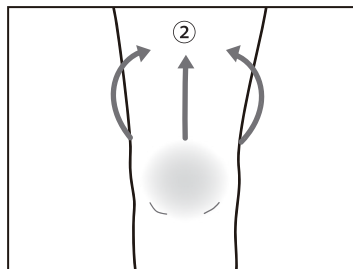

本体のお手入れ方法と保管について

ご使用後は製品の故障・動作不良を防ぐために必ずお手入れを行ってください。
お手入れをする際は必ず電源をオフにし、充電ケーブルを本体から抜いてください。

●本製品のお手入れ方法

本 体

- ①ヘッド面についた化粧品や水滴などを拭き取る。
 - ②付属の水拭きクロスを水で湿らせて固くしぼり、表面の汚れを拭き取る。
 - ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
 - ・ヘッド肌面の隙間に付着した汚れは、隙間用ブラシで優しく取り除いてください。
- ※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ③本体を完全に乾かしてから保管する。

●保管方法

- 乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所、火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所、不衛生な場所、不安定な場所での保管はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、本製品のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本製品の電源をオフにし充電器などのコード類を全て抜いてから保管してください。

よくある質問

Q 化粧品やジェルを塗布しなくても使用できますか？

A お肌が乾いた状態では、出力がうまく伝わりません。
化粧品やジェルなどを塗布し、ご使用ください。

Q お風呂で使用できますか？

A お風呂での使用は可能ですが、水やお湯の中に本製品を沈めて使用することはできません。故障する原因になりますのでご注意ください。

Q EMSを初めて使うのでレベルはどれを選択したらいいですか？

A 初めてのご使用の場合は、レベル 1 から必ずご使用ください。
また、EMS で強い痛みを感じる方は、我慢せずにご使用をお控えください。

Q 使用頻度は、どのくらいがいいのでしょうか？

A 週2～3回、フェイスモード10分、ボディモード10分を目安に使用してください。

Q サウナや岩盤浴で使用できますか？

A サウナや岩盤浴など、高温多湿になる場所での使用は、やけどや故障の原因になるので、おやめください。

Q どのタイミングで使用するのがいいのでしょうか？

A 入浴後など、体が温まっている時の使用がおすすめです。

故障かなと思ったら

下記の故障原因をよくお読みいただき、記載された内容に従いチェックをして故障の場合や原因が特定できない場合は、本体を分解などしないで買い上げ販売店までお問い合わせください。

症状 ◆電源が入らない

原因 ●充電残量が足りない可能性がありますので、充電を行ってください。

.....

症状 ◆充電ができない

原因 ●充電端子と充電口が合っていない可能性があります。
●ACアダプターを使用されている場合は、定格出力が5V 0.5A以上かご確認ください。

.....

症状 ◆使用中で電源が切れる

原因 ●充電電池の残量が少ない可能性があります。

※全てのモードは5分間経過するとアラームが鳴り、10分間経過すると自動で電源がオフになります。

.....

症状 ◆EMSが強い

原因 ●レベルを高く設定してしまっている可能性があります。
最初はレベル1から始め、徐々にレベル上げてご使用ください。

.....

症状 ◆充電完了したのに使用できない

原因 ●本製品は充電器を差したままのご使用はできません。
充電器を本体から抜いて再度ご使用ください。

アフターサービス

●充電池について

充電池は消耗品です(保証対象外)。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は約 300 回が目安です)。
充電池交換をご希望の場合はお買い上げ販売店やカスタマーセンターにご相談ください。

●廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から 1 年間保証いたします(消耗品は除く)。また、保証期間が過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、有償で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有償修理となるケースがありますので、無償修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、お買い上げ販売店やカスタマーセンターにご相談ください。

無償修理規定

- ①取扱説明書、本製品添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店にご連絡ください。
- ②保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ③ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合はカスタマーセンターにご相談ください。
- ④保証期間中でも、次の場合は有償修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ)接続するほかの機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - (ホ)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - (ヘ)一般家庭以外(例えば業務用として長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ト)車軸・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (チ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (リ)保証書のご提示がない場合。
- ⑤本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれを明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

保証書

商 品 名	ノエマ プロ ボディエステ X		
お 買 い 上 げ 日*	年	月	日 保証期間 本体:1年
お 名 前	(フリガナ) -----		
ご 住 所	〒		
お 電 話			
販 売 店・住 所			

※お買い上げ年月日につきましては、納品書やレシートに記載されている年月日を必ずお客様ご自身にて保管して下さい。

◆製品仕様

電源方式	充電式	動作時間	約 1 時間 (使用環境によって、動作時間は前後します。)
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	本体サイズ	約H85×D108×W121mm(本体のみ)
消費電力	13W (MAX)	製 造 国	中国
充電時間	約 5 時間 (充電環境によって、充電時間は前後します。)	材 質	本 体 : ABS 樹脂、SUS304 スマートバンド : シリコン、ポリウレタン

カスタマーセンター(ご相談窓口)

0120-22-8866

発行 / 株式会社ダイアナ
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-35-23

月～金曜日 9:30～19:00
土曜日 9:30～18:00
※日、祝日、年末年始除く

ダイアナ公式ホームページ

<https://www.diana.co.jp>

ダイアナ公式 facebookページ

<https://www.facebook.com/Diana.Official>



本誌掲載の写真、イラストおよび記事・内容の全部または一部の無断転載、複写を禁じます。

N o e m a
P R O
Body Esthe X